

Dragon Medical One Kurzübersicht

Korrigieren und löschen

- Streich das
- Lösch das
- Rückgängig machen/wiederhol das
- Markier [TEXT]
- Markier das (wählt den zuletzt diktierten Text aus)
- Erstes/letztes/nächstes Wort markieren/alles markieren
- Markier [TEXT] bis [TEXT]
- Auswahl aufheben
- Korrigier [TEXT]
- Korrigier das

Zeilen und Abstände einfügen

- Neuer Absatz
- Neue Zeile
- Cursor vor/hinter [TEXT]

Groß/Kleinschreibung

- Schreib das groß
- Schreib das klein
- Großschaltung

Navigieren

- Geh zum Satzanfang/Absatzanfang
- Geh zum Satzende/Absatzende
- Gehe zurück
- Cursor vor/hinter [TEXT]

Hilfe aufrufen und Interpunktion diktieren

Hilfe

- Hilfe öffnen
- Was kann ich sagen

Menü der Dragon-Leiste

Öffnen Sie das Menü der Dragon-Leiste, um Optionen zu ändern, Ihre AutoTexte, Befehle und Ihr Vokabular zu verwalten und die Hilfe aufzurufen




Menü der Dragon-Leiste

Interpunktion diktieren


Diktieren	Satzzeichen
Sagen Sie	Für
Komma	,
Punkt	.
Ausrufezeichen	!
Fragezeichen	?
Doppelpunkt	:
Semikolon/Strichpunkt	;
Anführungszeichen auf ...	"..."
Anführungszeichen zu	"..."
Klammer auf ... Klammer zu	(...)

Befehle für das Diktierfenster

- **Diktierfenster öffnen/schließen:** Öffnet oder schließt das Diktierfenster
- **Text übertragen:** Verschiebt den Text an die Cursorposition
- **Text zurücknehmen:** Holt den zuletzt übertragenen Text zurück
- **Text verwerfen:** Löscht den Inhalt des Diktierfensters

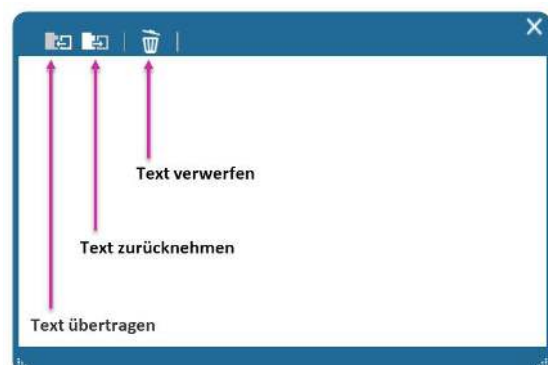

Mikrofonsteuerung

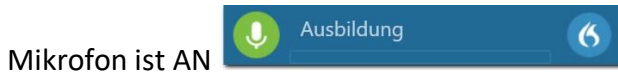


Mikrofon optimal nutzen

PowerMic/Philips SpeechMike:

- Halten Sie das Mikrofon in der nicht dominanten Hand
- Um zu diktieren, drücken und halten Sie die rote Taste
- Um das Mikrofon auszuschalten, geben Sie die Taste frei



Headset:

- Positionieren Sie das Mikrofon knapp unterhalb des Mundes und etwa 5 cm von Ihrem Kinn entfernt
- Um zu sprechen, klicken Sie das Mikrofonsymbol auf der Dragon-Leiste 
- Machen Sie vor und nach Befehlen eine kurze Pause, um sicherzustellen, dass sie erkannt werden
- Sprechen Sie in ganzen Sätzen und diktieren Sie auch die Interpunktionszeichen

Vokabular verwalten

Wörter hinzufügen:

1. Sagen Sie **Wort hinzufügen** oder dem **Vokabular hinzufügen**
2. Geben Sie das Wort in der korrekten Schreibweise ein
3. Um das Wort zu trainieren, klicken Sie **Standardausprache** oder das Mikrofonsymbol.
Hinweis: Für das Trainieren eines Wortes ist das Drücken der roten Taste auf dem PowerMic nicht erforderlich

Benutzerdefinierte Wörter verwalten:

1. Sagen Sie **Vokabular verwalten** > suchen Sie nach dem Wort/der Wortgruppe, die Sie ändern/trainieren wollen > nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor
2. Klicken Sie **+**, um ein neues Wort/eine neue Wortgruppe hinzuzufügen

Schritt-für-Schritt-Befehle

Schritt-für-Schritt-Befehle führen häufig verwendete Aktionen in Anwendungen aus oder öffnen diese

Schritt-für-Schritt-Befehl erstellen:

1. Sagen Sie **Befehle verwalten** oder **Schritt-für-Schritt-Befehle verwalten**
2. Klicken Sie **+**
3. Geben Sie einen Namen ein
4. Geben Sie eine Beschreibung ein (optional)
5. Geben Sie eine gesprochene Form ein
6. Klicken Sie **Neuer Schritt** und wählen Sie den Typ aus; wiederholen Sie das für jeden Schritt/jedes Tastenkürzel
7. Klicken Sie **Alles übernehmen**

Schritt-für-Schritt-Befehl bearbeiten

1. Sagen Sie **Befehle verwalten** oder **Schritt-für-Schritt-Befehle verwalten**
2. Wählen Sie die Schritt-für-Schritt-Befehle aus, die Sie bearbeiten wollen
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor
4. Klicken Sie **Alles übernehmen**

Schritt-für-Schritt-Befehl löschen

1. Sagen Sie **Befehle verwalten** oder **Schritt-für-Schritt-Befehle verwalten**
2. Wählen Sie die Schritt-für-Schritt-Befehle aus, die Sie bearbeiten wollen
3. Klicken Sie **X**
4. Klicken Sie **Alles übernehmen**

AutoTexte

Erstellen Sie einen AutoText, um mit einem einfachen Sprachbefehl ganze Textblöcke hinzuzufügen



AutoText hinzufügen:

1. Markieren Sie den gewünschten Text
 2. Sagen Sie **AutoText erstellen**
 3. Diktieren Sie den Namen (was Sie sagen werden, um den AutoText zu öffnen)
- Klicken Sie **Alles Übernehmen** und **Schließen**

Nützliche AutoText-Befehle:

- Dem Vokabular hinzufügen
- Nächstes/voriges Feld – nächste/vorige Variable
- Erstes/letztes Feld – erste/letzte Variable
- Standardwerte übernehmen (entfernt alle Klammern und übernimmt den GESAMTEN Standardtext)
- Feld komplett/Variable komplett (entfernt die Klammern und übernimmt den Text nur im AKTUELLEN Feld/der AKTUELLEN Variable)

Sprachfokus verankern

1. Öffnen Sie Dragon Medical One und die Zielanwendung (das Programm, in das Sie diktieren)
2. Platzieren Sie den Cursor dort, wo der Text geschrieben werden soll
3. Sagen Sie **Sprachfokus verankern**
4. Das Mikrofonsymbol wechselt zu 
5. Beginnen Sie zu diktieren, während Sie in anderen Anwendungen navigieren
6. Das Mikrofonsymbol wechselt zu 
7. Sagen Sie **Sprachfokus lösen**

Wichtige Hinweise

- Denken Sie daran, das Mikrofon auszuschalten, wenn Sie mit dem Diktieren fertig sind
- Korrigieren Sie häufig falsch erkannte Wörter – das erhöht die Genauigkeit und spart Zeit
- Positionieren Sie den Cursor dort, wo der Text geschrieben werden soll; der Text wird in das Fenster geschrieben, in dem der Cursor blinkt

Abmelden und beenden

- Die Optionen **Abmelden** und **Beenden** sind im Menü der Dragon-Leiste verfügbar
- Wählen Sie **Abmelden**, wenn Sie Vokabulare für Fachgebiete ändern wollen
- Wählen Sie **Beenden**, wenn Sie an einer Arbeitsstation fertig sind, damit Ihr Profil nicht von anderen Benutzer